

Urinary Concept





Urine katheter Hond Buster Hydrofiele Coating (HC)

-Hydrofiele coating

VETERINAIRE REVOLUTIE

In lijn met de strategie van KRUUSE dat veterinaire patiënten dezelfde kwaliteit van zorg verdienen als humane patiënten, zijn deze katheters ontwikkeld.

Wat is zo revolutionair aan deze urine katheter? Over de volledige lengte heeft de katheter een hydrofiele coating. Wanneer de coating wordt geactiveerd door water, ontstaat er een glad en visceus oppervlak over de gehele lengte van de katheter. Deze hydrofiele coating reduceert significant de wrijving in de urethra van de hond.

Dit vermindert het ongemak voor de hond en voorkomt iatrogene beschadigingen aan de urethra.

Hydrofiel gecoate urine katheters hebben nog extra voordelen, zoals minder microscopische hematorie en verminderd risico op iatrogene urineweginfectie (UTI).

De verpakking bestaat uit 12 individueel verpakte steriele katheters; verkrijgbaar in 4 maten.

Hoe te gebruiken...



open de verpakking



Giet (kraan)water in de verpakking




Plak de verpakking met de plakstrip op een tegel.
Wacht 30 sec.



De katheter is nu klaar voor gebruik

NB: De katheter mag niet langer dan 10 minuten in de urethra verblijven.

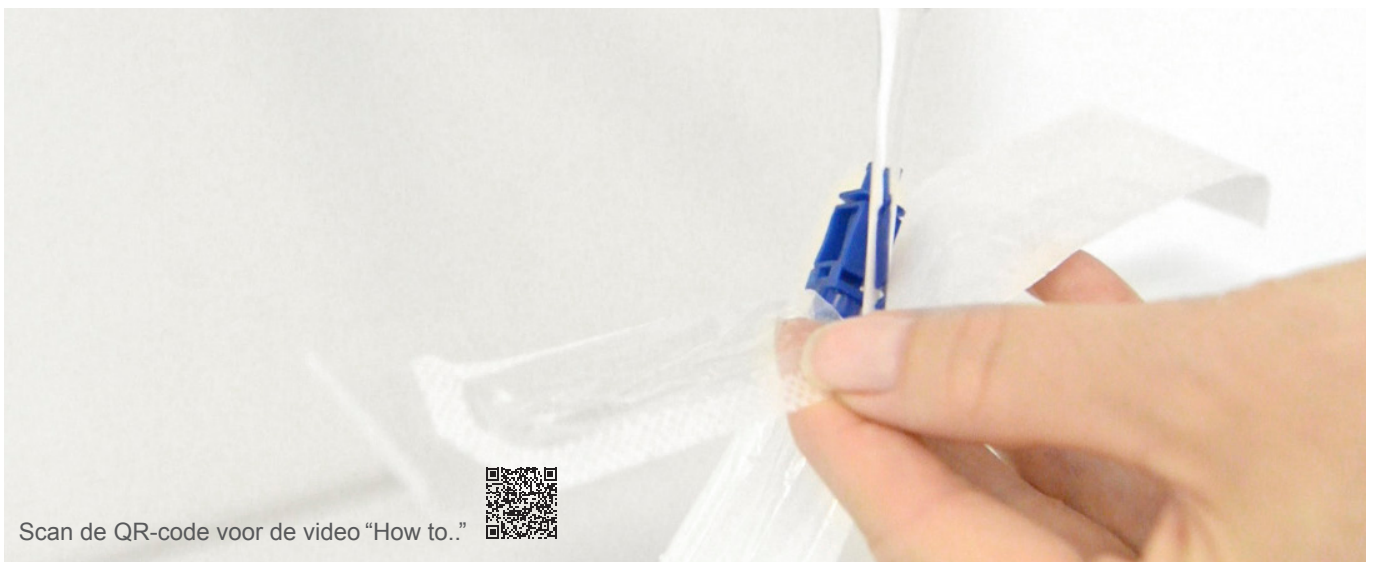

Scan de QR-code voor de video "How to.."



**Assortiment**

Art.nr	Maat (mm)	Maat (Fr)	Kleur	Verpakking
1224498	1,6 mm x 50 cm	5 Fr x 20 in	■	12 stuks
1224499	2,0 mm x 50 cm	6 Fr x 20 in	■	12 stuks
1224500	2,6 mm x 50 cm	8 Fr x 20 in	■	12 stuks
1224501	3,3 mm x 50 cm	10 Fr x 20 in	■	12 stuks



Productkenmerken

Visceus oppervlak

De hydrofiele coating resulteert in een zeer glad en visceus oppervlak.

Minder frictie

De hydrofiele coating reduceert de wrijving van de katheter in de urethra en helpt iatrogene beschadiging aan de urethra voorkomen.

Verlaagd infectierisico

De hydrofiele coating en atraumatische drainage gaten reduceren significant het risico op blaasontsteking.

Ongecompliceerde katheterisatie

Geen apart glijmiddel meer nodig.

Gelijkmatige verdeling

De coating is gelijkmatiger verdeeld over de katheter dan bij gebruik van glijmiddel

Duidelijke maatvoering

Kleurgecodeerde luer lock aansluiting voor snelle herkenning van de juiste maat.

Handige verpakking

Gebruiksvriendelijke doos en individueel verpakte steriele katheters





Urinary katheter Hond Buster Non Coated (NC)

- Non Coated

EXTRA COMFORT VOOR DE PATIËNT

De urine katheters Busters Non Coated zijn zachte katheters met hoge biocompatibele eigenschappen. Het is gemaakt van DEHP-vrij (phtalaatvrij) medische klasse PVC. Door de zachte eigenschappen is er minder kans op beschadiging van de slijmvliezen in de urethra en blaas, in vergelijking met meer rigide katheters.

- Met atraumatisch gepolijste laterale drainagegaten.
- Geschikt voor medium-lange plaatsing (3 dagen).
- Luer Lock aansluiting met kleurcodering voor eenvoudige formaatherkenning.
- Verpakking 12 stuks.

Hoe te gebruiken...



Open de verpakking



Voeg glijmiddel toe



De katheter is nu klaar voor gebruik

Assortiment

Art.nr	Maat (mm)	Maat (Fr)	Kleur	Verpakking
1224502	1,6 mm x 50 cm	5 Fr x 20 in	■	12 stuks
1224499	2,0 mm x 50 cm	6 Fr x 20 in	■	12 stuks
1224500	2,6 mm x 50 cm	8 Fr x 20 in	■	12 stuks
1224501	3,3 mm x 50 cm	10 Fr x 20 in	■	12 stuks





Urine katheter Hond Buster


De populaire productlijn van Buster urine katheters is nu uitgebreid tot 7 maten! Het is een rigide maar flexibele urinekatheter voor makkelijke inbrenging bij honden.

- Gemaakt van topkwaliteit polypropyleen, transparant, niet-irriterend.
- **Closed end** punt met 2 atraumatische zij-openingen om weefselschade te voorkomen.
- Female Luer lock aansluiting.
- Verpakking 12 stuks.


Art.nr	Maat (mm)	Maat (Fr)	Verpakking
1214516	1.3 mm x 50 cm	4 Fr x 20 in	12 stuks
1214517	1.6 mm x 50 cm	5 Fr x 20 in	12 stuks
1214518	2.0 mm x 50 cm	6 Fr x 20 in	12 stuks
1214520	2.3 mm x 50 cm	7 Fr x 20 in	12 stuks
1214521	2.6 mm x 50 cm	8 Fr x 20 in	12 stuks
1214522	3.0 mm x 50 cm	9 Fr x 20 in	12 stuks
1214523	3.3 mm x 50 cm	10Fr x 20 in	12 stuks



Afgeronde *closed end* punt met atraumatische zijgaten

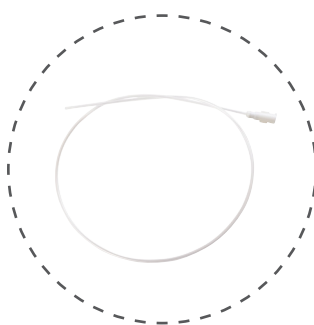

Flexibel polypropyleen

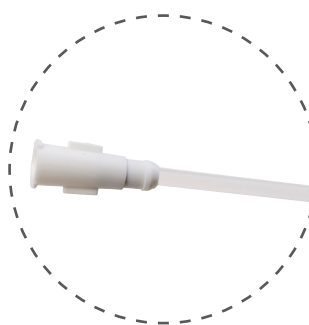

Female luer lock aansluiting







Urine katheter Hond BUSTER Foley

2-wegs katheter van 100% **siliconen** met een 3-5 cc retentieballon en stylet. De katheter heeft een afgeronde punt en atraumatische zijgaten. Siliconen materiaal heeft een hoge biocompatibiliteit en is geschikt voor lange termijn plaatsins in de urethra/blaas (tot 7 dagen!).


- Siliconen catheter met hoge biocompatibiliteit
- geschikt voor lange termijn plaatsing (7 dagen)
- makkelijk te verwijderen stylet
- kleurgecodeerd
- verpakking 5 stuks

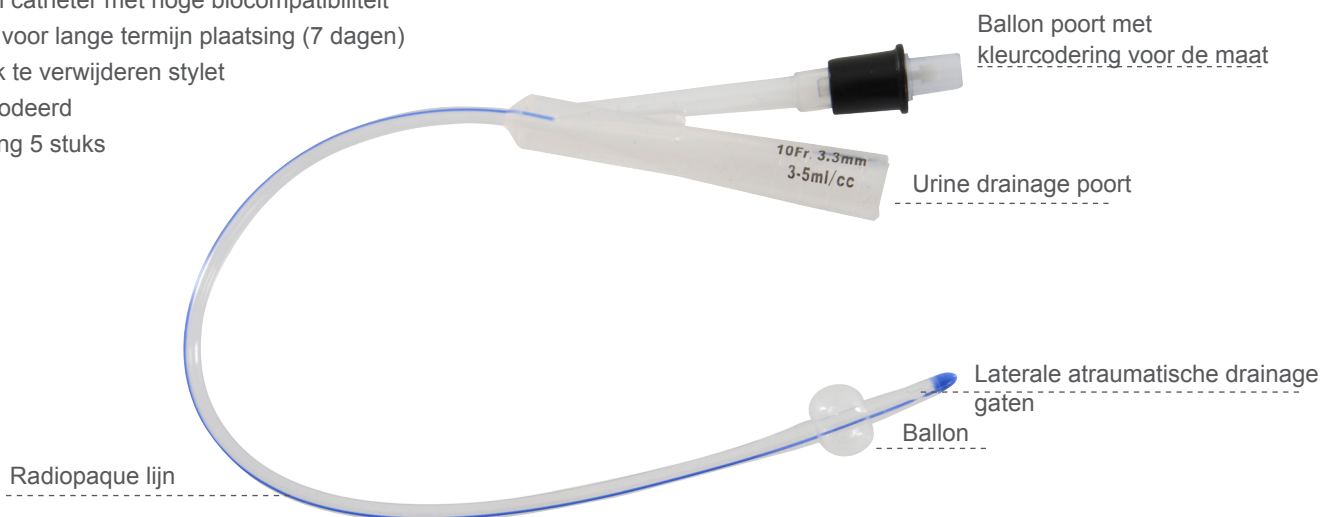


Hoe te gebruiken...

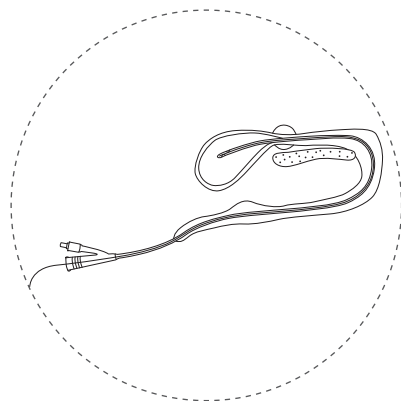

Breng de katheter via de urethra in de blaas

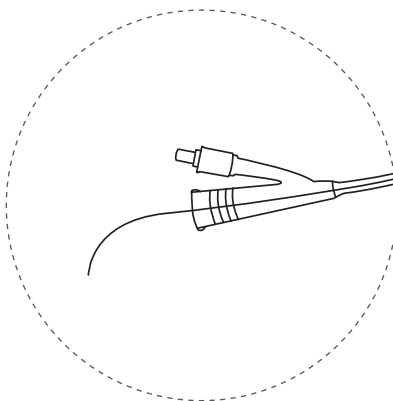

Verwijder subtiel de stylet

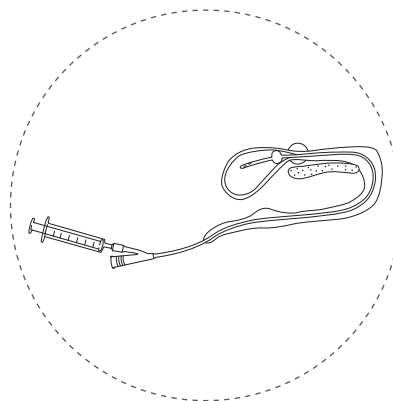

Vul de ballon met fysiologische zoutoplossing

Assortiment

Art.nr	Maat (mm)	Maat (Fr)
1222382	2 mm x 30 cm	6 Fr x 12 in
1222383	2 mm x 55 cm	6 Fr x 22 in
1222384	2.6 mm x 30 cm	8 Fr x 12 in
1222385	2.6 mm x 55 cm	8 Fr x 22 in
1222386	3.3 mm x 30 cm	10 Fr x 12 in
1222387	3.3 mm x 55 cm	10 Fr x 22 in

Kleur





Urine katheter Kat BUSTER

- Closed end

Urine katheter voor katten met **closed end** en 2 atraumatische zij-openingen. Gemaakt van medische topkwaliteit low-density polyethyleen (LDPE).

- Met luer lock adapter.
- Aan het distale einde zit een rond bodemplaatje om de katheter vast te kunnen hechten.
- Verkrijgbaar met of zonder stylet (mandrin).
- Per stuk steriel verpakt, verpakking 12 stuks.




Art.nr	Type	Maat (mm)	Maat (Fr)
1214540	Zonder stylet	1.0 x 130 mm	3 Fr x 5.2 in
1214542	Zonder stylet	1.3 x 130 mm	4 Fr x 5.2 in
1214534	Met stylet	1.0 x 130 mm	3 Fr x 5.2 in
1214536	Met stylet	1.3 x 130 mm	4 Fr x 5.2 in
1214541	Zonder stylet	1.3 x 160 mm	4 Fr x 6.3 in
1214535	Met stylet	1.3 x 160 mm	4 Fr x 6.3 in

Urine katheter Kat BUSTER

- Open end

Urine katheter voor katten met **open end**. Gemaakt van DEHP-vrij medische kwaliteit polyethyleen met goede biocompatibele eigenschappen.

- Extra rigide om makkelijk in te brengen.
- Luer lock aansluiting.
- Aan distale einde zit een rond bodemplaatje (soort vleugels) om de katheter vast te kunnen hechten.
- Per stuk steriel verpakt, verpakking 12 stuks.

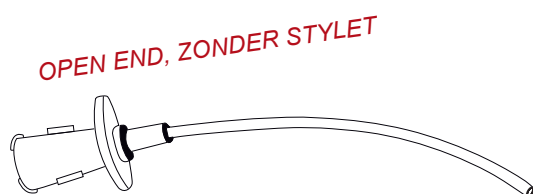

Art.nr	Type	Maat (mm)	Maat (Fr)
1214543	Zonder stylet	1.0 x 130 mm	3 Fr x 5.2 in
1214544	zonder stylet	1.3 x 130 mm	4 Fr x 5.2 in



Urine katheter Kat Buster Easy Slide



Populaire katten katheter nu beschikbaar in de BUSTER uitvoering met extra voordelen...

Urine katheter voor katten gemaakt van DEHP-vrij PTFE (polytetrafluoroethyleen) van medische kwaliteit. Beschikbaar in 2 varianten: open end en closed end.

Productkenmerken

- Hoge biocompatibiliteit
- Geschikt voor medium-lange plaatsing (3 dagen)
- Optimale rigiditeit (geen stylet nodig) maar wel met de juiste zachtheid
- Goede glijdende eigenschappen van het oppervlak waardoor makkelijk in te brengen
- Flexibele eindplaat met hechtgaten om de katheter goed vast te zetten
- Luer lock aansluiting waar een spuit voor spoelen en/of urinezak op kan worden aangesloten
- Radiopaque
- Individueel steriel verpakt
- Kleine verpakkingen: slechts 5 katheters per doos

**GOEDE GLIJDENDE EIGENSCHAPPEN
VOOR MAKKELIJKE
KATHETERISATIE**

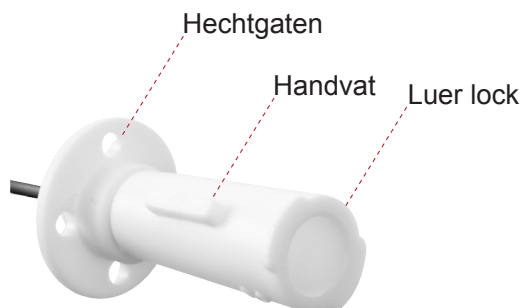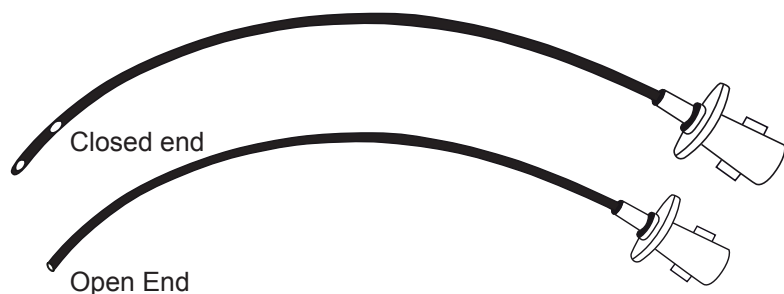


Cat. No	Type	Maat (mm)	Maat (Fr)	Verpakking
1225673	Closed end	1.2 x 110 mm	3.5 Fr x 4 1/3 in	5/pk
1225674	Closed end	1.2 x 140 mm	3.5 Fr x 5 1/2 in	5/pk
1225675	Open end	1.2 x 110 mm	3.5 Fr x 4 1/3 in	5/pk
1225676	Open end	1.2 x 140 mm	3.5 Fr x 5 1/2 in	5/pk
1225677	Open end	1.2 x 180 mm	3.5 Fr x 7 in	5/pk



Urine Katheter Kat BUSTER Barium

Urine katheter voor katten gemaakt van zacht polyurethaan dat zacht wordt bij lichaamstemperatuur. Heeft van alle katheters de hoogste biocompatibiliteit.

- Zeer geschikt voor lange termijn catherisatie: tot **7 dagen!**
- Female luer lock aansluiting waar een spuit voor spoelen en/of urinezak op kan worden aangesloten.
- Aan het distale einde zit een rond bodemplaatje om de katheter vast te kunnen hechten.

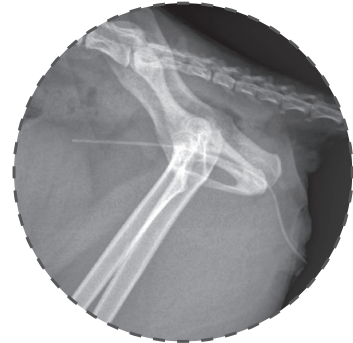

Cat. No	Type	Maat (mm)	Maat (Fr)
1214538	Closed end, met stylet	1.0 x 130 mm	3 Fr x 5.2 in
1214539	Closed end, met stylet	1.3 x 130 mm	4 Fr x 5.2 in



Samenvatting



Urine Katheter BUSTER HC

- Hydrofiele Coating

- Hydrofiel gecoate PVC katheter
- Ideaal for korte termijn gebruik
- Vermindert wrijving en ongemak tijdens katherisatie
- Geen glijmiddel nodig

Urine Katheter BUSTER NC

- Non coated

- PVC katheter met goede biocompatibiliteit
- Flexibel en zacht voor comfortabele katherisatie
- Gebruiksvriendelijke verpakking

Urine Katheter BUSTER

- Rigide polypropyleen katheter voor makkelijke inbrenging
- Grootste keuze in maatvoering
- Gebruiksvriendelijke verpakking

Urine katheter BUSTER Foley

- Siliconen katheter met zeer hoge biocompatibiliteit
- Geschikt voor lange termijn plaatsing (7 dagen)
- Retentieballon om de katheter goed op zijn plaats te houden



Urine Katheter Kat BUSTER

- Closed end

- Biocompatibele polyethyleen katheter
- Populaire closed end katheter
- Hechtgaten in bodemplaatje
- Luer lock aansluiting en handvat voor meer grip

Urine Katheter Kat BUSTER

- Closed end

- Biocompatibele polyethyleen katheter
- Meer rigide
- Geschikt voor retrograde flushing van urinegruis

Urine Katheter Kat BUSTER Easy Slide

- Biocompatibele PTFE katheter
- Optimale rigiditeit: geen stylet nodig, maar nog steeds de juiste zachtheid
- Flexibele bodemplaat voor vasthechten katheter
- Radiopaque: zichtbaar op röntgenfoto

Urine Katheter Kat BUSTER Barium

- Zachte biocompatibele polyurethaan katheter
- Wordt zacht bij lichaamstemperatuur
- Radiopaque: zichtbaar op röntgenfoto



Aanvullende producten


Urinezak BUSTER 750 ml - Luer Lock aansluiting

Deze urine opvangzak van Buster kan aan alle standaard BUSTER urine katheters van KRUUSE worden bevestigd. De zak heeft een non-return klep die een retrograde terugstroom van urine voorkomt.

Op de zak staat een volumeschaal om de urineproductie te monitoren. De push-pull release klep maakt het mogelijk om de zak te legen.

Verpakking 10 stuks.

1225678 Urinezak Buster 750 ml luer lock 10 stuks

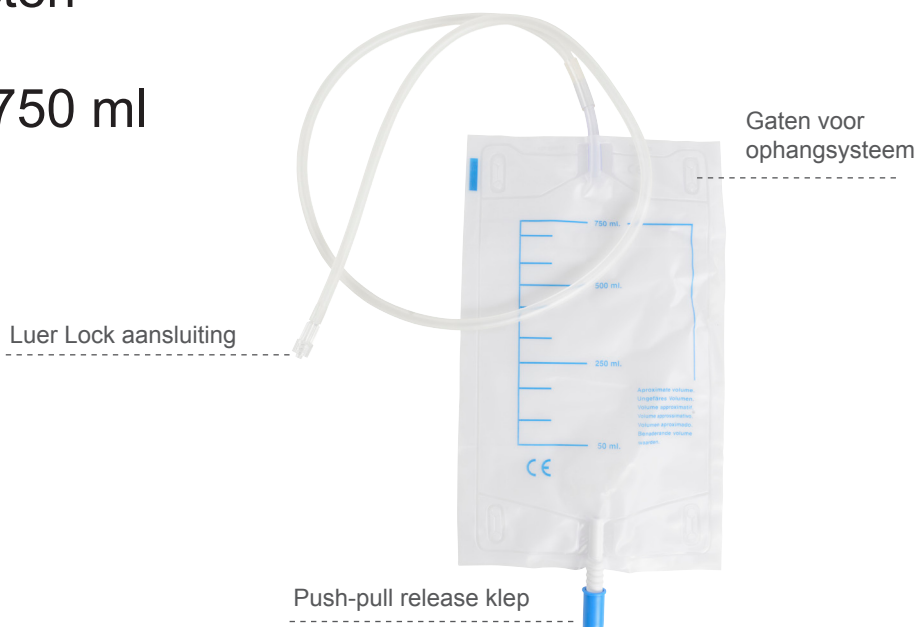

Urinezak BUSTER 750 ml - Adapter voor Foley Catheter

Deze urine opvangzak van Buster is geschikt voor de BUSTER Foley katheters van KRUUSE. De zak heeft een non-return klep die een retrograde terugstroom van urine voorkomt.

Op de zak staat een volumeschaal om de urineproductie te monitoren. De push-pull release klep maakt het mogelijk om de zak te legen.

Verpakking 10 stuks.

1225679 Urinezak Buster 750 ml voor Foley katheter 10 stuks



Urinezak ophangstelsysteem BUSTER

Hanger voor de urinezakken van KRUUSE (Buster). Makkelijk ophangstelsysteem om bijvoorbeeld aan de tafel of hok te bevestigen.

Verpakking 10 stuks.

1225680 Urinezak ophangstelsysteem Buster 10 stuks



Urine teststrips HUISMERK

Goedkope en makkelijk af te lezen urinetest. Inexpensive and easy-to-read test. Resultaten zijn binnen 60 seconden af te lezen.

Parameters: Glucose, eiwit, pH, nitriet, ketonen, urobilinogeen, bilirubine, bloed, soortelijk gewicht, leukocyten.



9003567 Urine teststrips HS Urispec Plus 10 Vet 100 stuks

Refractometer Soortelijk gewicht

Voor het meten van het soortelijk gewicht van urine.

Normale referentiewaarden:

Hond: 1.015 - 1.040

Kat: 1.015 - 1.050



1135197 Refractometer Euromex Urine soortelijk gewicht RF5612

Urine opvangsysteem Hond

Urine opvangsysteem bestaande uit een transparant monsterbuisje die vastzit aan een schepvormig opvangbakje. De urine stroomt automatisch in het opvangbuisje, welke vervolgens met een schroefdop af te sluiten is voor transport.

Handig om snel en gemakkelijk urine te verzamelen bij honden.



9008933 Urine opvangsysteem hond HS steriel 1 stuk

Dog-i-Noir

Urine opvangsysteem voor honden. De set bevat een gebruiksaanwijzing, opvangbakje voor de urine met handig schenkduitje (geschikt voor kleine én grote honden), 2 buisjes met sticker, handschoenen en afvalzakje.



1216468 Urine opvangsysteem hond Dog-i-Noir 1 set

Urigrid

Urigrid is een kattenbakvulling speciaal ontworpen om urine bij katten te verzamelen. De vulling beïnvloedt de urine niet, waardoor deze accuraat onderzocht kan worden. De set bestaat uit 200 gram polypropyleen kattenbakzand, pipet en flacon.

9009058 Urine opvangsysteem kat Urigrid HS 10 sets



Hydrofoob zand

Hydrofobe kattenbakvulling, biologisch afbreekbaar, met een natuurlijke, niet-giftige en urine afstotende coating. De urine van de kat blijft op het oppervlak liggen en kan gemakkelijk worden verwijderd met een pipet en reageerbuis.

Als zeer goed door katten aanvaard, omdat het geurloos is en aangenaam aanvoelt door de zandachtige textuur.

Een set bestaat uit: zak met 300 gram kattenbakvulling, pipet en reageerbuis.



9883180 Urine opvangsysteem Kat Hydrofoob zand HS 1 stuks

9883179 Urine opvangsysteem Kat Hydrofoob zand HS 3 stuks

Gel

Met beschermende film voor smering van instrumenten, armen en handen. Voor geboortes, vaginale en rectale onderzoeken. Ready-to-use.

1223045 Glijmiddel Bovivet 500 ml

Steriel glijmiddel, niet zaaddodend. Geschikt voor het inbrengen van K.I. katheters, urine katheters en instrumentarium.

1142016 K.I. glijmiddel steriel 250 ml KRUUSE



www.covetrus.nl

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager van Covetrus of met onze afdeling Customer Service via telefoon +31 (0)485 - 33 55 55. Afwijkingen in tekst en afbeeldingen zijn voorbehouden. Alle prijzen en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor actuele prijzen zie onze webshop (www.covetrus.nl). Tussentijdse artikel- en prijsmutaties worden direct verwerkt op de webshop van Covetrus. Alle transacties geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Covetrus (Kamer van Koophandel nummer 16044987) gevestigd Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk.