

Wondverzorging


Covetrus Essentials & KRUUSE



Zwachtels,
verbanden, spalken
en nog veel meer!

Inhoudsopgave


Introductie	4
1 Kompressen	6
Gaaskompressen	6
Schuimkompressen	9
Absorberende kompressen	10
Othaematoom kompressen	11
2 Zwachtels	12
Cohesieve zwachtels	12
Adhesieve zwachtels	15
Overig	16
Oorverbanden	19
Pootverbanden	19
Pootverbanden	20
Fracturen	20
3 Polsterverbanden	21
4 Spalken en gips	22
Gipsverbanden kunststof glasvezel	22
Spalken	23
5 Tapes	26
Hechtpleisers	26
6 Wondverzorging	28
7 Bescherming	32
Laarzen en schoenen	32
Staartbeschermer	33
8 Paard	34
Watten op rol	34
Spalken	35
Verbanden	36
9 Overig	38
Maatschappelijke verantwoordelijkheid	39

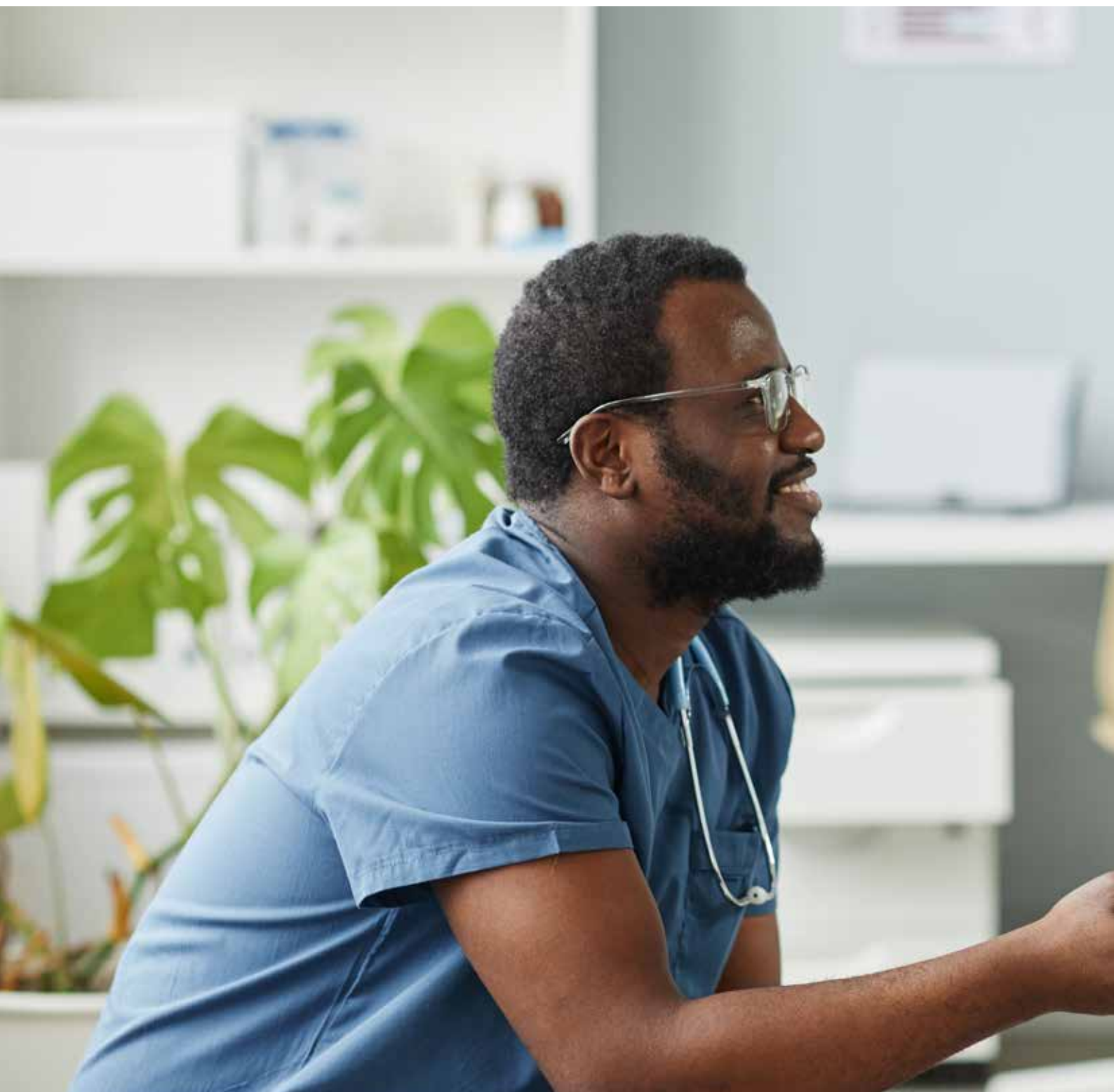

Vochtige wondgenezing zorgt voor het snelste genezingsproces, vermindert pijn, stimuleert de overdracht van vocht, bevordert autolytisch debridement en werkt als een bacteriële barrière. Covetrus Essentials en KRUUSE wondproducten zijn ontwikkeld om het wondmilieu positief te beïnvloeden en een optimale wondgenezing te bevorderen.

Snellere wondgenezing

- 24 uur continue wondgenezing omdat de wond nooit mag uitdrogen
- Huidcellen regenereren ongeveer twee keer zo snel in een vochtige omgeving
- Het contact tussen wond en wondvocht blijft behouden en zorgt voor een normale genezingsbalans
- Het beschermende verband vermindert het risico op infectie van buitenaf en zorgt voor een snellere genezing
- Overtollig exsudaat wordt afgevoerd, waardoor het wondbed vochtig en niet nat blijft

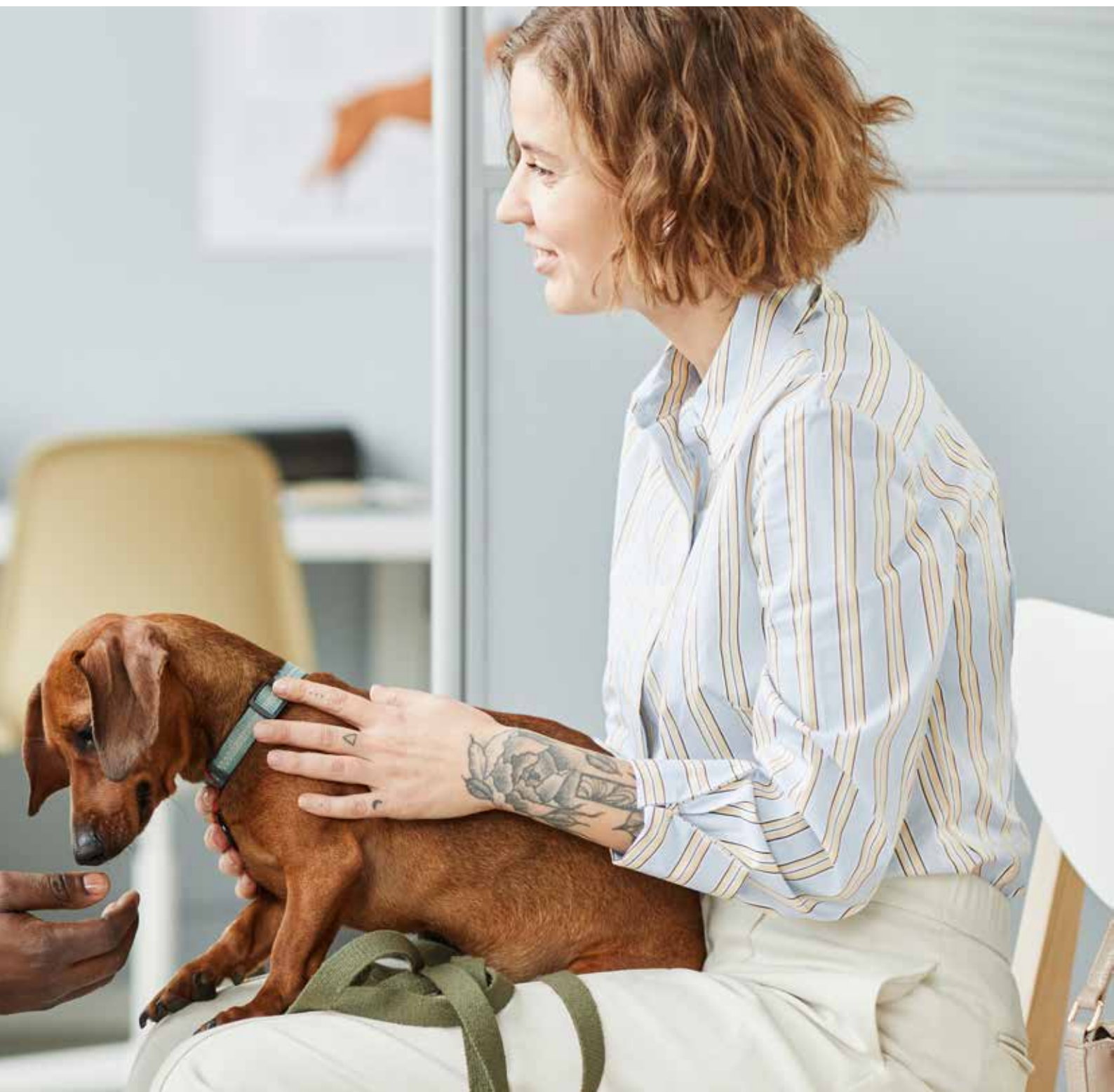

Meer comfort

- Door de zenuwuiteinden gehydrateerd te houden, wordt pijn verminderd
- Minder pijn bij het verwijderen van het verband
- Minder verbandwisselingen - elk verband gaat 3-5 dagen mee

Verbeterd resultaat

- Minder en mooiere littekens door verbeterde uitlijning van collageenvezels

Duurzaamheid

- Minder verbandverbruik
- Verminderde behoefte aan sedatie



Hoofdstuk 1

Kompressen

Gaaskompressen



Wat is het verschil tussen non-woven en hydrofiele kompressen?

Non-woven kompressen zijn gewoonlijk gemaakt van synthetische vezels die tegen elkaar geperst worden, zodat ze lijken op gewoven materiaal. Daardoor krijgt men een betere absorptie en capillaire werking. Dit type kompres is sterker, volumineuzer, zachter en absorbeert beter dan de klassieke hydrofiele kompressen. Ze pluizen ook minder.

Het klassieke hydrofiele kompres is ook absorberend en zeer plooibaar maar heeft de neiging om wat meer te pluizen en kleeft ook makkelijker in de wonde dan non-woven kompressen. Ze absorberen een beetje minder dan non-woven kompressen. Worden eerder gebruikt om een wonde te reinigen en zijn over het algemeen economischer.

Non-woven gaaskompressen



CVET Niet-steriel – 4 lagen

Niet-steriel non-woven kompres.



	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Laags	Verpakking
1	2800214	Niet-steriel non-woven kompres	5 x 5 cm	4-laags	200 stuks
2	2800215	Niet-steriel non-woven kompres	7,5 x 7,5 cm	4-laags	200 stuks
3	2800216	Niet-steriel non-woven kompres	10 x 10 cm	4-laags	200 stuks



CVET Niet-steriel – 8 lagen

Niet-steriel non-woven kompres in een voordeelverpakking.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Laags	Verpakking
2800229	Niet-steriel non-woven kompres	7,5 x 7,5 cm	8-laags	2.500 stuks

Hydrofiele gaaskompressen



Niet-steriel

Niet-steriel gaaskompres van 100% gewezen katoen.
Met omgevouwen randen.

	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Laags	Verpakking	Omdoos
1	2800217	Niet-steriel gaaskompres	5 x 5 cm	12-laags	100 stuks	100 pakjes
2	2800218	Niet-steriel gaaskompres	5 x 5 cm	8-laags	100 stuks	100 pakjes
3	2800219	Niet-steriel gaaskompres	7,5 x 7,5 cm	12-laags	100 stuks	50 pakjes
4	2800220	Niet-steriel gaaskompres	7,5 x 7,5 cm	8-laags	100 stuks	50 pakjes
5	2800221	Niet-steriel gaaskompres	10 x 10 cm	12-laags	100 stuks	50 pakjes
6	2800222	Niet-steriel gaaskompres	10 x 10 cm	8-laags	100 stuks	50 pakjes

**CVET Steriel**

Steriel gaaskompres van 100% katoen.
Met omgevouwen randen.



	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Laags	Verpakking
1	2800223	Steriel gaaskompres	5 x 5 cm	12-laags	50 x 2 stuks
2	2800224	Steriel gaaskompres	7,5 x 7,5 cm	12-laags	40 x 2 stuks
3	2800225	Steriel gaaskompres	10 x 10 cm	12-laags	25 x 2 stuks

**KRUUSE Hydrofiel**

Niet-steriel hydrofiële gaaskompressen van 100% katoen,
100 stuks.



	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Laags	Verpakking
	1214867	Hydrofiel gaaskompres	5 x 5 cm	8-laags	100 stuks
	1214868	Hydrofiel gaaskompres	7,5 x 7,5 cm	8-laags	100 stuks
	1214869	Hydrofiel gaaskompres	10 x 10 cm	8-laags	100 stuks

X-ray gaaskompressen**CVET Steriel met röntgencontrastlijn**

Steriele hydrofiële gaaskompressen met een blauwe
Röntgencontrastlijn en omgevouwen randen.

Vermijd een nieuwe laparatomie omwille van twijfel over een achtergebleven kompres. Gebruik kompressen met een röntgencontrastlijn en gebruik altijd een vast aantal kompressen. Bij twijfel over het aantal getelde kompressen, kan een röntgenfoto worden gemaakt om eventueel achtergelaten kompressen op te sporen.

	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Laags	Verpakking
1	2800226	Gaaskompres X-ray	5 x 5 cm	12-laags	10 x 10 stuks
2	2800227	Gaaskompres X-ray	7,5 x 7,5 cm	12-laags	10 x 10 stuks
3	2800228	Gaaskompres X-ray	10 x 10 cm	12-laags	10 x 10 stuks

Schuimkompressen



KRUUSE Foam verband

Niet-klevend schuimverband van polyurethaan, aan één zijde bedekt met een dunne polyurethaan film dat bacteriën tegenhoudt. Het is een comfortabel primair of secundair verband voor absorptie en handhaven van een vochtige omgeving.

De zachte foamlag vormt zich perfect naar de huid en helpt bij het afvoeren van overtollig exsudaat. Het verband is sterk absorberend, niet-klevend en vormt zich naar de huid. Dikte 4,5 mm, verkrijgbaar in 4 formaten.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Dikte	Verpakking
1214888	Foam verband	5 x 5 cm	4,5 mm	10 stuks
1214889	Foam verband	10 x 10 cm	4,5 mm	10 stuks
1214890	Foam verband	15 x 15 cm	4,5 mm	5 stuks
1214891	Foam verband	10 x 20 cm	4,5 mm	10 stuks

Absorberende kompressen



KRUUSE Lite-absorb

Voor mild exsuderende wonden.

Wondverband gemaakt van een viscose en polyester-mix. Heeft een geperforeerde polyethyleen coating aan beide zijden zodat deze niet aan de wond plakt.

Voor wonden met veel vochtverlies adviseren wij de Super-Absorb variant.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1232047	Lite-Absorb	5 x 5 cm	25 stuks
1232048	Lite-Absorb	10 x 10 cm	25 stuks
1232049	Lite-Absorb	10 x 20 cm	25 stuks



KRUUSE Super-absorb

3-laags wondverband met hoge absorptie-eigenschappen voor sterk exsuderende wonden.

Het uitstekende absorberende vermogen vermindert het aantal verbandwisselingen en zorgt voor een betere wondgenezing. Kleeft niet aan de wond.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1232050	Super-Absorb	10 x 10 cm	10 stuks
1232051	Super-Absorb	10 x 20 cm	10 stuks
1232052	Super-Absorb	20 x 20 cm	10 stuks
1232053	Super-Absorb	20 x 30 cm	10 stuks



KRUUSE Steri-protect

Steriel veterinair verband met uitstekende absorptie eigenschappen.

Toepasbaar als droog verband, koud verband of warm verband.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1214874	Steri-protect	20 x 40 cm	10 stuks

Othaematoom kompressen



KRUUSE Othaematoom kompres

De compressie pad zorgt voor goede ventilatie en een mooi cosmetisch resultaat.

Het kompres bestaat uit een binnenste open zachte schuimlaag en een steviger buitenlaag waarop de hechtingen worden geknoopt.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1231705	Othaematoom kompres	12 x 8 cm	10 stuks



Hoofdstuk 2

Zwachtels

Cohesieve zwachtels



CVET Cohesieve zwachtel

Elastische, zelfklevende bandage verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zeer ondersteunend zonder af te knellen. Met de hand af te scheuren. Flexibel en ademend, kleeft niet aan de haren.

- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Kleur	Afmetingen	Omdoos
2800055	● Cohesieve zwachtel	blauw	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800056	● Cohesieve zwachtel	rood	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800057	● Cohesieve zwachtel	groen	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800058	● Cohesieve zwachtel	lichtblauw	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800059	● Cohesieve zwachtel	oranje	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800060	○ Cohesieve zwachtel	wit	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800061	● Cohesieve zwachtel	zwart	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800063	● Cohesieve zwachtel	blauw	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800064	● Cohesieve zwachtel	rood	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800065	● Cohesieve zwachtel	groen	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800066	● Cohesieve zwachtel	lichtblauw	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800067	● Cohesieve zwachtel	oranje	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800068	○ Cohesieve zwachtel	wit	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800069	● Cohesieve zwachtel	zwart	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800071	● Cohesieve zwachtel	blauw	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800072	● Cohesieve zwachtel	rood	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800073	● Cohesieve zwachtel	groen	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800074	● Cohesieve zwachtel	lichtblauw	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800075	● Cohesieve zwachtel	oranje	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800076	○ Cohesieve zwachtel	wit	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800077	● Cohesieve zwachtel	zwart	10 cm x 4,5 m	18 stuks



CVET Assortiment cohesieve zwachtels met print

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800062	Assortiment cohesieve zwachtels met print	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800070	Assortiment cohesieve zwachtels met print	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800078	Assortiment cohesieve zwachtels met print	10 cm x 4,5 m	18 stuks





CVET VetFlex cohesieve zwachtel

SUPERIEURE KWALITEIT

Elastische, zelfklevende bandage verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zeer ondersteunend zonder af te knellen. Met de hand af te scheuren. Flexibel en ademend, kleeft niet aan de haren.

- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Kleur	Afmetingen	Omdoos
2800185	● VetFlex cohesieve zwachtel	blauw	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800186	● VetFlex cohesieve zwachtel	groen	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800187	● VetFlex cohesieve zwachtel	lichtblauw	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800188	● VetFlex cohesieve zwachtel	oranje	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800189	● VetFlex cohesieve zwachtel	rood	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800190	○ VetFlex cohesieve zwachtel	wit	5 cm x 4,5 m	36 stuks
2800191	● VetFlex cohesieve zwachtel	blauw	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800192	● VetFlex cohesieve zwachtel	groen	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800193	● VetFlex cohesieve zwachtel	lichtblauw	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800194	● VetFlex cohesieve zwachtel	oranje	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800195	● VetFlex cohesieve zwachtel	rood	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800196	○ VetFlex cohesieve zwachtel	wit	7,5 cm x 4,5 m	24 stuks
2800197	● VetFlex cohesieve zwachtel	blauw	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800198	● VetFlex cohesieve zwachtel	groen	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800199	● VetFlex cohesieve zwachtel	lichtblauw	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800200	● VetFlex cohesieve zwachtel	oranje	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800201	● VetFlex cohesieve zwachtel	rood	10 cm x 4,5 m	18 stuks
2800202	○ VetFlex cohesieve zwachtel	wit	10 cm x 4,5 m	18 stuks



KRUUSE FunFlex

Nú met print aan de binnenzijde!

Flexibel cohesief lichtgewicht verband van superieure kwaliteit met leuke prints & kleuren. Makkelijk te scheuren en blijft goed zitten.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1232054	FunFlex Inside-out	5 cm x 4,5 m	10 stuks
1232055	FunFlex Inside-out	5 cm x 4,5 m	10 stuks
1232056	FunFlex Inside-out	5 cm x 4,5 m	10 stuks



KRUUSE Valueline zwachtel

Cohesieve (zelfklevende) elastische bandage van KRUUSE. Dit is de economisch voordelige variant van KRUUSE. Voor superieure kwaliteit: kies voor de KRUUSE Summer of Fun-flex zwachtels.

Verkrijgbaar in de unikleuren blauw, groen, rood, en wit en 3 breedtes.



Artikel	Omschrijving	Kleur	Afmetingen	Verpakking
1223254	Valueline zwachtel	blauw	5 cm x 4,5 m	10 stuks
1223255	Valueline zwachtel	rood	7,5 cm x 4,5 m	10 stuks
1223256	Valueline zwachtel	rood	10 cm x 4,5 m	10 stuks



KRUUSE Chew-Stop

Een cohesieve bandage met een toevoeging waardoor voorkomen wordt dat het dier aan het verband gaat likken of bijten.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1232106	Chew-Stop	5 cm x 4,5 m	10 stuks
1232107	Chew-Stop	7,5 cm x 4,5 m	10 stuks
1232108	Chew-Stop	10 cm x 4,5 m	10 stuks

Voorbeelden van toepassingen van een verband:

- Controleren van zwelling en pijn
- Bescherming van het ledemaat tegen de omgeving, trauma en mechanische kracht
- Fractuurmanagement



Adhesieve zwachtels



CVET Elastische bandage adhesief

Klevende, elastische bandage met een hoge luchtdoorlaatbaarheid.

- Omzoomd
- Natuurlijke rubberen coating
- 100% katoen
- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Afmetingen
2800051	Elastische bandage adhesief	4,5 m x 2,5 cm
2800052	Elastische bandage adhesief	4,5 m x 5 cm
2800053	Elastische bandage adhesief	4,5 m x 7,5 cm
2800054	Elastische bandage adhesief	4,5 m x 10 cm



KRUUSE Vet-plast

Elastisch klevend verband van katoen, in de lengterichting rekbaar. Voorzien van natuurlijke rubber coating, wit met een gele middenlijn.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1188102	Vet-plast	5 cm x 4,5 m	10 stuks
1188104	Vet-plast	10 cm x 4,5 m	10 stuks



Overig



CVET polsterverband cohesief

Sterk, elastisch polsterverband. Cohesief, maar kleeft niet aan de huid, haren of wonden. Resistent tegen water, zalf en crème. Deze bandage kan gebruikt worden als ondersteunend verband of als drukverband. Vergelijkbaar met de tepelbandage maar dan dikker.

- Latexvrij
- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Afmetingen
2800560	Vet bandage versterkt	8 cm x 1 m
2800561	Vet bandage versterkt	8 cm x 5 m
2800562	Vet bandage	9 cm x 2 m



CVET Speenverband schuim cohesief

De speenbandage is een uniek elastisch, absorberend en zelfklevend verband: plakt alleen aan zichzelf en niet aan de huid. De elastische eigenschap van het verband maakt het eenvoudig om aan te leggen en houdt alles volledig flexibel.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
2800559	Speenverband schuim cohesief	6 cm x 4,5 m



KRUUSE Polsterverband Soft-flex cohesief

De speenbandage is een uniek elastisch verband met schuimachtig polyester, dat absorbeert en zelfklevend is: plakt alleen aan zichzelf en niet aan de huid. De elastische eigenschap van het verband maakt het eenvoudig om aan te leggen en houdt alles volledig flexibel.

Waterresistent en te gebruiken in combinatie met diverse zalven.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1214875	Polsterverband Soft-flex cohesief	5 cm x 2,5 m
1214876	Polsterverband Soft-flex cohesief	10 cm x 2,5 m
1214877	Polsterverband Soft-flex cohesief	15 cm x 2,5 m



KRUUSE Polsterverband Soft-flex adhesief

Zelfklevende, zacht en flexibel; plakt niet aan huid, haren of wond. Zeer luchtdoorlatend, irriteert de huid niet. Kan worden toegepast op natte wonden.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1216261	Polsterverband Soft-flex adhesief	5 cm x 2,5 m





CVET Buikverband

Wasbare buikbandage van 100% katoen, ter bescherming van huidaandoeningen of operatiewonden. Eenvoudig verstelbaar door de velcrosluitingen. Goede pasvorm.

- Verpakking per stuk



Artikel	Omschrijving	Maat	Doeldier	Afmeting
2800668	Buikverband	1	Kat	33 cm
2800669	Buikverband	2	Poedel	36 cm
2800670	Buikverband	3	Spaniel	44 cm
2800671	Buikverband	4	Kleine herder	49 cm
2800672	Buikverband	5	Duitse herder	55 cm
2800673	Buikverband	6	Deense dog	57 cm
2800674	Buikverband	7	St. Bernard	64 cm



KRUUSE Buisverband

Dit verband is gemakkelijk te verwisselen en is luchtdoorlatend om de genezing te bevorderen. Op maat gemaakt voor moeilijk te bandage gebieden zoals op de ledematen. Geen tape nodig om bandage te bevestigen. Stevig, maar comfortabel. Wordt niet als druk aanvaren door de patiënt. Rafelt niet en is scheurbaar.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1216260	Buisverband	2,5 cm x 6,5 m



CVET Buisverband

Naadloos geweven flexibele bandage op rol. Voor fixatie van wondverbanden.
Materiaal: 67% katoen en 33% viscose.

Indicaties

- Voor de bescherming van de huid onder gips
- Voor gebruik bij adhesieve dressings
- Voor zalfverbanden
- Onder compressieverbanden
- Kleur
- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Maat	Afmetingen	Verpakking
2800834	Buikverband	0	1,5 cm x 20 m	1 stuk
2800835	Buikverband	1	2,5 cm x 20 m	1 stuk
2800836	Buikverband	2	6 cm x 20 m	1 stuk
2800837	Buikverband	3	8 cm x 20 m	1 stuk
2800838	Buikverband	4	10 cm x 20 m	1 stuk
2800839	Buikverband	5	12 cm x 20 m	1 stuk
2800840	Buikverband	6	16 cm x 20 m	1 stuk
2800841	Buikverband	7	21 cm x 20 m	1 stuk



CVET Elastisch gaasverband

Niet-steriele, elastische bandage.
Materiaal: 45% katoen en 55% polyamide.

- Niet-steriel
- Individueel verpakt in cellofaan
- Verpakking: 20 stuks



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800517	Gaasverband elastisch	4 cm x 4 m	20 stuks
2800518	Gaasverband elastisch	6 cm x 4 m	20 stuks
2800519	Gaasverband elastisch	8 cm x 4 m	20 stuks
2800520	Gaasverband elastisch	10 cm x 4 m	20 stuks
2800521	Gaasverband elastisch	12 cm x 4 m	20 stuks



CVET Ideal zwachtel

Poreuze en luchtdoorlatende elastische zwachtel voor steunverbanden en nabehandeling van luxaties en fracturen.

Materiaal: 88% katoen, 11% polyamide en 1% polyurethaan.

- Steriliseerbaar tot 135°C
- Kleur: wit
- Verpakking: 10 stuks

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800878	Ideal zwachtel	4 cm x 5 m	10 stuks
2800879	Ideal zwachtel	6 cm x 5 m	10 stuks
2800880	Ideal zwachtel	8 cm x 5 m	10 stuks
2800881	Ideal zwachtel	10 cm x 5 m	10 stuks
2800882	Ideal zwachtel	12 cm x 5 m	10 stuks



CVET Katoenen bandage

Bandage van 100% katoen. Vooral gebruikt als beschermende bandage, om ander verband op de plek te houden (het geeft een betere grip tussen de verbandlagen) en om spalken vast te zetten.


- Niet-steriel
- Verpakking: 20 stuks

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800897	Katoenen windsel	4 cm x 4 m	20 stuks
2800898	Katoenen windsel	6 cm x 4 m	20 stuks
2800899	Katoenen windsel	8 cm x 4 m	20 stuks
2800900	Katoenen windsel	10 cm x 4 m	20 stuks



Oorverbanden

1. Vorm een stuk cohesief verband in een kegel om de gehoorgang te beschermen. Maak een kussentje om het oor te immobiliseren.

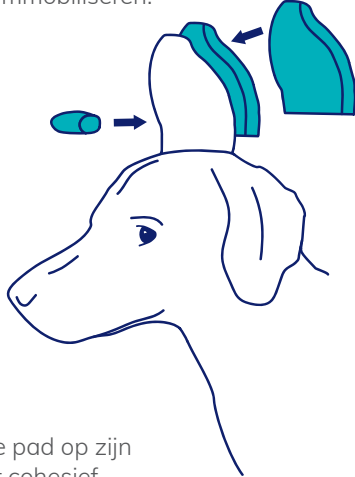

2. Houd de pad op zijn plaats met cohesief verband. De ontlasting wordt geabsorbeerd en opgeslagen in de binnenste lagen.



3. Verbind het oor met cohesief verband. Houd op zijn plaats met een breder AnimalPolster-verband dat zelfs op huid en vacht blijft plakken. Laat een opening voor de gehoorgang vrij en laat het gezonde oor vrij van verband.




Pootverbanden

1. Begin met een stuk polstering of cohesief verband om het been te wikkelen.



2. Scheur een geschikte lengte af om tussen de tenen te passen. Bevestig het aan de wrap, draai het 180 graden, schuif het smalle gedeelte tussen de tenen en bevestig het aan de andere kant aan de wrap. Herhaal de procedure voor elke teen.

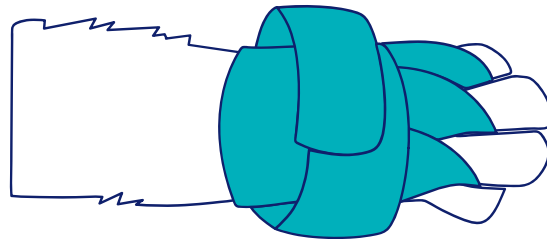


3. Voltooi het verband door een tweede wikkel rond de poot aan te brengen om het verband vast te zetten.

 **Vet polster verband**
Verstevigd


 **Vet polster verband**
9 cm x 2 m

Pootverbanden


1. Begin met het plaatsen van een stuk polstering of cohesief verband tussen de tenen en het kussentje.

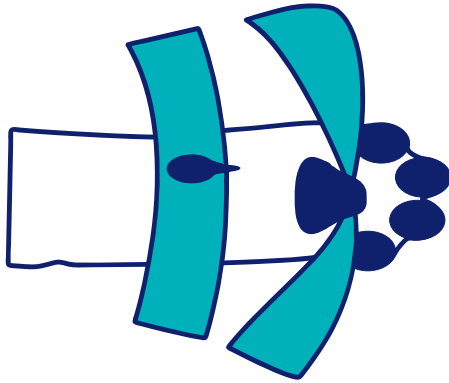


2. Maak een gleuf in de cohesief verband en plaats een stuk vulling rond de wolfsklauw.

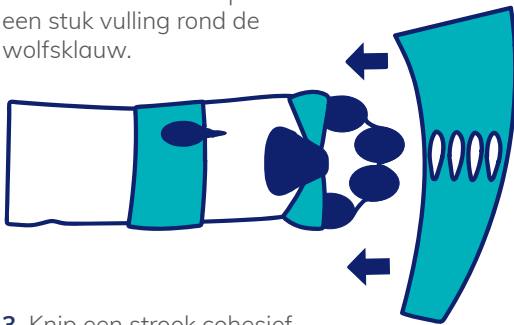

3. Knip een strook cohesief verband op lengte. Maak sleuven om over de tenen te gaan.

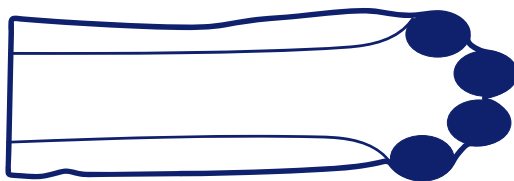



4. Schuif de tenen door de sleuven en vouw het verband zoals afgebeeld.

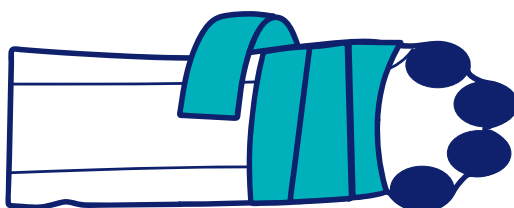

5. Indien nodig, wikkel een extra stuk cohesief verband om de poot.

Fracturen

1. Volg dezelfde methode die wordt gebruikt bij het verbinden van een poot. Vergeet niet extra lagen cohesief verband aan te brengen (zie punt 5).

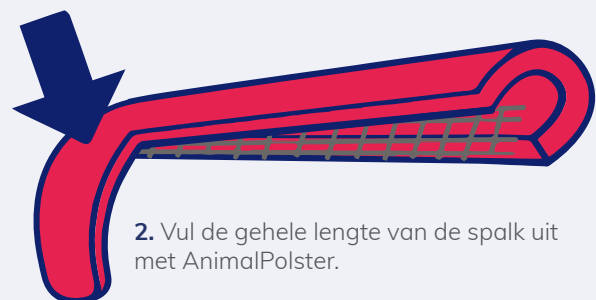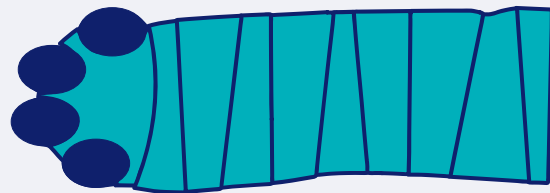

3. Houd de spalk op zijn plaats met cohesief verband. Deze methode elimineert het risico op zweren veroorzaakt door wrijven. Door de tenen vrij te laten bewegen, wordt een grotere mobiliteit verzekerd zonder de bloedtoevoer te beperken.



Hoofdstuk 3

Polsterverbanden



CVET Polsterverband VET

Dit polsterverband is dikker en een tikje stijver dan het klassieke synthetische polsterverband.

- Huidvriendelijk luchtdoorlatend materiaal
- Materiaal: 100% polyester
- Verpakking: per stuk

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800513	Polsterverband	3 m x 6 cm	1 rol
2800514	Polsterverband	3 m x 10 cm	1 rol
2800515	Polsterverband	3 m x 15 cm	1 rol
2800516	Polsterverband	3 m x 25 cm	1 rol



CVET Polsterverband synthetisch

Synthetisch polsterverband gemaakt van non-woven materiaal waarbij de individuele vezels niet samengekleefd maar mechanisch samengeperst zijn. Ideaal om te polsteren onder rigide en semi-rigide verbanden en onder spalken. Het synthetisch polsterverband is zachter en minder stijf dan Vet polsterverband ([2800513](#) - [2800516](#)).

- Non-woven
- Geen toegevoegde chemische stoffen
- Zacht
- Zeer rekbaar
- Luchtdoorlatend

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800859	Polsterverband synthetisch	3 m x 6 cm	108 stuks
2800857	Polsterverband synthetisch	3 m x 10 cm	72 stuks
2800858	Polsterverband synthetisch	3 m x 15 cm	36 stuks



Hoofdstuk 4

Spalken en gips

Gipsverbanden kunststof glasvezel



CVET Gipsverband kunststof glasvezel

Geïmpregneerd glasvezelgipsverband voor de verzorging van gesloten fracturen en het fixeren van gewrichten. Deze gips is goed moduleerbaar en licht in gewicht. Sterke fixatie en snel terug belastbaar. Poreus en röntgendoorlatend.

- Verpakking: per stuk
- Een omdoos bevat 10 stuks

Gebruik

- Plaats eerst een polsterverband
- Maak de cast nat, knijp het overtollige water eruit en breng aan
- De cast wordt hard na 3-4 minuten
- Het dier mag er gewicht op zetten na 20 minuten



Artikel	Omschrijving	Kleur	Breedte	Lengte
2800582	○ Gipsverband kunststof glasvezel	wit	2,5 cm	1,8 m
2800583	○ Gipsverband kunststof glasvezel	wit	5 cm	3,6 m
2800584	○ Gipsverband kunststof glasvezel	wit	7,5 cm	3,6 m
2800585	○ Gipsverband kunststof glasvezel	wit	10 cm	3,6 m
2800586	● Gipsverband kunststof glasvezel	blauw	2,5 cm	1,8 m
2800587	● Gipsverband kunststof glasvezel	blauw	5 cm	3,6 m
2800588	● Gipsverband kunststof glasvezel	blauw	7,5 cm	3,6 m
2800589	● Gipsverband kunststof glasvezel	blauw	10 cm	3,6 m
2800590	● Gipsverband kunststof glasvezel	zwart	5 cm	3,6 m
2800591	● Gipsverband kunststof glasvezel	zwart	7,5 cm	3,6 m
2800592	● Gipsverband kunststof glasvezel	zwart	10 cm	3,6 m
2800593	● Gipsverband kunststof glasvezel	roze	2,5 cm	1,8 m
2800594	● Gipsverband kunststof glasvezel	roze	5 cm	3,6 m
2800595	● Gipsverband kunststof glasvezel	roze	7,5 cm	3,6 m
2800596	● Gipsverband kunststof glasvezel	rood	2,5 cm	1,8 m
2800597	● Gipsverband kunststof glasvezel	rood	5 cm	3,6 m
2800598	● Gipsverband kunststof glasvezel	rood	7,5 cm	3,6 m



KRUUSE VET-Lite

Ventilerend wit termoplastische spalk- en immobiliserend verband. Bij verwarmen kan het vervormd worden. Oopnieuw te gebruiken, röntgendoorlatend.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1112138	VET-Lite (Hexcelite)	5 cm x 1,8 m
1112139	VET-Lite (Hexcelite)	7,5 cm x 1,8 m
1112140	VET-Lite (Hexcelite)	10 cm x 1,8 m
1112142	VET-Lite (Hexcelite)	15 cm x 1,8 m

Spalken



KRUUSE Spalk Buster

Disposable spalk in groen plastic met schuimpolstering aan binnenzijde. Kan aan distale zijde worden gemodelleerd door de spalk te verwarmen; kan ook eenvoudig worden ingekort. Röntgendoorlatend.

Artikel	Omschrijving	Maat	Afmetingen
1214913	Spalk Buster groen	S	3 x 20 cm
1214914	Spalk Buster groen	M	4 x 30 cm
1214915	Spalk Buster groen	L	5 x 40 cm



KRUUSE Spalk Buster aluminium

Aluminium spalk met schuim polstering aan binnenzijde. Kan in de juiste vorm worden gebogen en op maat worden geknipt.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1135566	Spalk Buster aluminium gepolsterd	0,2 x 2 x 50 cm
1223111	Spalk Buster aluminium gepolsterd	0,2 x 1,5 x 50 cm



KRUUSE Spalk Buster soft splint

Aluminium strip aan beide zijden bedekt met schuimvulling. Gemakkelijk in vorm te knippen met een gewone schaar en kan in elke vorm worden gevormd. Zeer flexibel. Radiolucent.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1223112	Spalk Buster soft splint	1 m



KRUUSE Spalk Buster Orthovet

Buster Orthovet spalken zijn ontwikkeld aan de hand van veel toegepaste humane spalken en doorontwikkeld voor veterinaire gebruik.

De spalk wordt bevestigd aan de poot met behulp van 3 klittenband riemen. Met de spalk wordt de poot in een natuurlijk looppositie behouden en kan de patiënt gewicht plaatsen op de aangedane poot. Geeft extra ondersteuning bij fracturen, ziet er professioneel uit en is van zeer goede kwaliteit.

De spalk voor de achterpoot reikt tot boven de hak. De voorpoot spalk reikt tot net onder de elleboog. Beide spalken lopen tot onder de ondervoet door. De spalk is comfortabel voor het dier: gevoerd met schuim en staat beweging toe. Kan voor elke patiënt precies op maat worden gemaakt door de spalk te knippen of te verwarmen.

- Geeft extra ondersteuning bij fracturen
- Comfortabel voor het dier, gevoerd met schuim en staat beweging toe
- Eenvoudig op maat te maken door de spalk te knippen of te verwarmen
- Verkrijgbaar in diverse maten voor zowel de voorpoot als de achterpoot

Voorpoot



	Artikel	Omschrijving	Maat	Afmeting	Poot
1	1214907	Spalk Buster Orthovet	XS	13,75 cm	Voorpoot
2	1214902	Spalk Buster Orthovet	S	16,25 cm	Voorpoot
3	1214903	Spalk Buster Orthovet	M	18,75 cm	Voorpoot
4	1214904	Spalk Buster Orthovet	L	21,75 cm	Voorpoot
5	1214905	Spalk Buster Orthovet	XL	23,75 cm	Voorpoot

Achterpoot



	Artikel	Omschrijving	Maat	Afmeting	Poot
6	1214906	Spalk Buster Orthovet	XS - Kat	12,50 cm	Achterpoot
7	1214908	Spalk Buster Orthovet	XS	17,50 cm	Achterpoot
8	1214909	Spalk Buster Orthovet	S	20 cm	Achterpoot
9	1214910	Spalk Buster Orthovet	M	22,50 cm	Achterpoot
10	1214911	Spalk Buster Orthovet	L	27,50 cm	Achterpoot
11	1214912	Spalk Buster Orthovet	XL	31,25 cm	Achterpoot



KRUUSE Spalk Buster Quicksplint

Spalk voor de onderpoot bij honden en katten. Speciaal ontworpen voor een simpele goede pasvorm. De spalk ondersteunt de poot van de mediale of laterale zijde, en moet in combinatie met polstering worden aangebracht. De spalk is geperforeerd om drainage en ventilatie te ondersteunen. Kan toegepast worden bij fractures, weke delen trauma, postoperatief, eerste hulp ed.

Voorpoot



	Artikel	Omschrijving	Maat	Poot
1	1145561	Spalk Buster Quicksplint	S	Voorpoot
2	1145562	Spalk Buster Quicksplint	M	Voorpoot
3	1187150	Spalk Buster Quicksplint	L	Voorpoot

Achterpoot



	Artikel	Omschrijving	Maat	Poot
4	1149118	Spalk Buster Quicksplint	S	Achterpoot
5	1149119	Spalk Buster Quicksplint	M	Achterpoot



Hoofdstuk 5

Tapes

Hechtpleisters



CVET Hechtpleister Classic Katoen

Deze traditionele tape is luchtdoorlatend en waterafstotend. Materiaal: 100% katoen.

- Kleur: huidskleur
- Scheurbaar

1



2



3



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1 2800842	○ Hechtpleister Classic Katoen	5 m x 1,25 cm	18 stuks
2 2800843	○ Hechtpleister Classic Katoen	5 m x 2,5 cm	12 stuks
3 2800844	○ Hechtpleister Classic Katoen	5 m x 5 cm	6 stuks



CVET Hechtpleister Silk

Tape op basis van kunstzijde met een hypoallergene polyacrylaat kleeflaag. Geschikt voor een gevoelige huid.

- Kleur: wit

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800845	○ Hechtpleister Silk	5 m x 1,25 cm	18 stuks
2800846	○ Hechtpleister Silk	5 m x 2,5 cm	12 stuks
2800847	○ Hechtpleister Silk	5 m x 5 cm	6 stuks



CVET Hechtpleister tape Non-woven Papier

Deze hechtpleister bestaat uit een luchtdoorlatend, non-woven materiaal en is geschikt voor een gevoelige huid.

- Kleur: wit

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800848	○ Hechtpleister tape Non-woven papier	5 m x 1,25 cm	18 stuks
2800849	○ Hechtpleister tape Non-woven papier	5 m x 2,5 cm	12 stuks
2800850	○ Hechtpleister tape Non-woven papier	5 m x 5 cm	6 stuks





CVET Hechtpleister Transparant

Een rolpleister op een transparante, flexibele polyethyleenfolie. Is geperforeerd en kan dus gemakkelijk in de breedte, in de lengte of in het midden worden gescheurd. Deze tape is ademend, laat waterdamp door en is beschrijfbaar.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
2800854	Hechtpleister Transparant	5 m x 1,25 cm	18 stuks
2800855	Hechtpleister Transparant	5 m x 2,5 cm	12 stuks
2800856	Hechtpleister Transparant	5 m x 5 cm	6 stuks



CVET Sporttape

Klevende tape die alle eigenschappen bezit die men van hoogwaardige tape mag verwachten. Voor de behandeling van luxaties en fracturen en als ondersteuning op kompressieverband. Niet-elastische tape met hoge trekkracht. Materiaal: 100% viscose met een zinkoxide kleeflaag.

- Scheurbaar
- Kleur: wit
- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Afmetingen
2800851	○ Sporttape	10 m x 2,5 cm
2800852	○ Sporttape	10 m x 3,8 cm
2800853	○ Sporttape	10 m x 5 cm



CVET Hechtpleister tape sterk adhesief

Sterke adhesieve tape voor multifunctionele doeleinden.

- Verpakking: per stuk



Artikel	Omschrijving	Kleur	Afmeting
2800172	● Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar	zwart	50 m x 1,9 cm
2800173	● Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar	zwart	50 m x 3,8 cm
2800176	● Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar	zwart	50 m x 5,0 cm
2800175	● Hechtpleister tape sterk adhesief, scheurbaar	zwart	50 m x 6,0 cm
2800177	○ Hechtpleister tape sterk adhesief	wit	50 m x 1,9 cm
2800178	○ Hechtpleister tape sterk adhesief	wit	50 m x 2,5 cm
2800179	○ Hechtpleister tape sterk adhesief	wit	50 m x 3,8 cm
2800180	○ Hechtpleister tape sterk adhesief	wit	50 m x 5,0 cm
2800181	○ Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof	wit	50 m x 1,9 cm
2800182	○ Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof	wit	50 m x 2,5 cm
2800183	○ Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof	wit	50 m x 3,8 cm
2800184	○ Hechtpleister tape sterk adhesief, waterproof	wit	50 m x 5,0 cm



Hoofdstuk 6

Wondverzorging



CVET Huidreiniging & tape remover spray

Deze spray wordt gebruikt om de huid te reinigen en vochtig te houden. Verwijdert biofilm en fibrinoïde residuen. Aanvullend is deze spray handig om zachtjes oude of verkleefde kompressen en verbanden te verwijderen. Verwijdert de geur snel en irriteert niet. Wondgeur wordt snel verholpen door gebruik van huidreinigingsspray.

Gebruik

Verwijder eerst vuil, bloed en andere residuen. Spray daarna op de aangetaste zone. Dit kan meerdere keren herhaald worden bij hele vuile gebieden voor mechanische reiniging en debridement. Overtollige vloeistof kan ter plekke gelaten worden.

Voor het verwijderen van verbanden: spray tot het verband of kompres goed nat is. Wacht even en verwijder het dan voorzichtig. Indien nodig kan nadien de huidreinigende gel worden aangebracht. Er zijn geen beperkingen in frequentie en duur van gebruik. Een lichte chloorgeur kan opgemerkt worden en geeft aan dat het product werkt.

Opmerkingen

Niet gebruiken bij bekende allergie voor de bestanddelen. Niet gebruiken in combinatie met andere huidreinigingsproducten. Er worden geen interacties verwacht met andere producten. Tijdens dracht en lactatie, dient het product voorzichtig te worden gebruikt.



Deze huidreinigingsspray is heel handig voor het verwijderen van verkleefd verband of dressings. Gewoon het verband goed nat sprayen, dan kan het makkelijk worden verwijderd.

Veiligheidsvoorschriften

Alleen voor uitwendig gebruik. Enkel gebruiken op externe huidwonden. Niet inslikken, niet in de ogen sprayen. Uit de buurt van kinderen houden. Enkel intacte, onbeschadigde flesjes gebruiken. Enkel gebruiken tot de vervaldatum op het flesje. Eens geopend, kan het product maximum 12 weken worden gebruikt.

Bestanddelen

Water, natriumhypochloride < 0,08%

Artikel	Omschrijving	Inhoud
2801549	Huidreiniging en tape remover spray	75 ml





CVET Huidreinigingsgel

De huidreinigingsgel is een gebruiksklare hydrogel. Houdt de huid vochtig, creëert een beschermende film en bevordert zo het huidherstel. Het aanbrengen van de gel is niet irriterend, en er is geen beperking in de duur van gebruik van het product. Wondgeur wordt snel verholpen door gebruik van de gel.

Bestanddelen

Water, natriumhypochloride < 0,06%, lithiummagnesiumnatriumsilicaat



Artikel	Omschrijving	Inhoud
2801548	Huidreinigingsgel	20 ml

1



2



CVET Manuka honinggel

Gemaakt van Manuka honing uit Nieuw-Zeeland. De honing bevordert het autolytische debridement door osmose en helpt een vochtig wondmilieu te handhaven.

Manuka Honinggel werkt verzachtend, beschermt de huid tegen uitdrogen en ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. Manuka Honinggel zorgt voor een vochtige omgeving van de huid. De gel laat zich makkelijk aanbrengen en kan zo nodig worden afgedekt met een secundair verband. Door de samenstelling blijft de gel ook in een natte omgeving goed op zijn plaats.

Onder toezicht van een dierenarts kan Manuka Honey Wound Care Dressings worden gebruikt voor:

- Traumawonden
- Chirurgische wonden
- Zwerenwonden
- Geïnfekteerde wonden
- 1e en 2e graads brandwonden
- Snijwonden
- Schaafwonden
- Moeilijk te genezen wonden.

Handig verpakt in een tube van 15 g voor eenmalig gebruik of een tube van 42,5 g.

Eigenschappen

- Bevat 100% Leptospermum scoparium-honing uit Nieuw-Zeeland
- De lage pH zorgt voor een osmotisch effect waardoor een autolytische debridement en een gezonde granulatie bevorderd wordt
- Vermindert de wondgeur
- De kleine tubes voor eenmalig gebruik verminderen de kans op contaminatie, de tubes van 42,5 g zijn ideaal bijvoorbeeld voor gebruik bij paarden

	Artikel	Omschrijving	Inhoud
1	2800417	Manuka honinggel	15 g
2	2800418	Manuka honinggel	42,5 g



De lage pH van manuka honing creëert een zuur milieu waardoor een wond beter heelt.



Honing is het originele “superfood”

Nectar van de in Nieuw-Zeeland inheemse manukastruik (*Leptospermum scoparium*) heeft aantoonbaar uitstekende positieve eigenschappen vergeleken met gewone honing.

Bijen verrijken de Manuka-honing met het enzym glucose-oxidase, dat reageert met vocht en glucose omzet in gluconzuur - daarbij komen lage hoeveelheden waterstofperoxide vrij.



KRUUSE Manuka ND wondverband

Met honing geïmpregneerd niet-klevend primair wondverband. Acetaat gaas geïmpregneerd met 100% Leptospermum scoparium Manuka honing uit Nieuw Zeeland.

Het verband zorgt voor een vochtig wondmilieu dat bevorderlijk is voor genezing.

Bij wonden met matig tot zwaar wondexsudaat is de Manuka AD meer geschikt.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud
1206269	Manuka ND wondverband	5 x 5 cm	10 stuks
1206365	Manuka ND wondverband	10 x 12,5 cm	10 stuks
1206367	Manuka ND wondverband	10 x 100 cm	10 stuks



KRUUSE Manuka AD wondverband

Met honing geïmpregneerd absorberend verband. 100% Leptospermum scoparium honing uit Nieuw-Zeeland geïmpregneerd in een pad van superabsorberende polymeren. Kan worden gebruikt bij vochtige huidplekken.

Voor matig tot zwaar exsuderende wonden.



Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Inhoud
1206360	Manuka AD wondverband	5 x 5 cm	10 stuks
1206362	Manuka AD wondverband	10 x 12,5 cm	10 stuks
1206363	Manuka AD wondverband	10 x 100 cm	10 stuks



KRUUSE Manuka honinggel

Steriele honingzalf met een gel-achtige consistentie. Kan direct op de huid worden aangebracht of op een verband. Indien gewenst kan de substantie dunner worden gemaakt: breng de substantie op kamertemperatuur door de tube tussen de handpalmen te wrijven.



Artikel	Omschrijving	Inhoud	Hoeveelheid
1206364	Manuka honinggel	15 gram	10 stuks



KRUUSE Wondpleisterspray

Pleisterspray met transparante en waterresistente bescherm laag. Milieuvriendelijk, bevat geen CFK's. Versie met en zonder teer; teer heeft een vlieg afwerende werking.

Artikel	Omschrijving	Inhoud
1214878	Wondpleisterspray zonder teer	200 ml
1214879	Wondpleisterspray met teer	200 ml





KRUUSE Wondspoeling pomp

Het Wond lavage systeem van KRUUSE helpt bij een optimale wondverzorging voor een betaalbare prijs. KRUUSE is de eerste fabrikant die speciaal voor veterinair gebruik een wond spoel unit heeft ontworpen, met gestabiliseerde druk van 0,82 bar (12 psi).

Met de pomp kan 3 liter vloeistof in minder dan 5 minuten worden gespoeld.

Advies: gebruik isotone vloeistof op lichaamstemperatuur.

Artikel	Omschrijving	Inhoud
1214892	Wondspoeling pomp	3 liter



KRUUSE Wondspoeling oplossing

Sachet met de juiste verhouding aan elektrolyten. 1 sachet is voldoende voor het maken van een 3 liter fysiologische zoutoplossing, die in combinatie met de Wondspoeling pomp kan worden gebruikt. De oplossing is zeer geschikt voor professionele wondspoeling.

1 sachet bevat 30.051 gram poeder bestaande uit:

- Natrium 8.964 gram
- Chloride 11.591 gram
- Lactaat 7.482 gram
- Kalium 0.470 gram
- Calcium 0.181 gram
- PHMP 1.200 gram
- Water 0.163 gram

Artikel	Omschrijving	Inhoud
1214893	Wondspoeling oplossing	10 stuks



KRUUSE Hydrogel

Een heldere amorfe hydrogel met carboxymethylcellulose polymeren, propyleenglycol en water. Draagt bij aan een vochtige wondomgeving en verdunt en absorbeert exsudaat. Bevordert natuurlijk wonddebridement door autolyse. Stevige gel, vloeit niet snel uit.

- Zelf-conserverend. Door de 0.04% Polyhexanide dat ook antiseptisch werkt.
- Plakt niet. De HydroGel plakt niet aan het wondbed, huid of haar.
- Makkelijk aan te brengen. De vorm en zachtheid van de tube maakt het makkelijk om de gel diep en in alle hoeken aan te brengen.
- Zorgt voor een vochtig milieu. De HydroGel bevat 85% water, dat gereguleerd wordt afgegeven.
- Bevordert natuurlijk debridement door autolyse. Wanneer de HydroGel water afgeeft aan de huid, worden de necrose en huidresten opgelost en geabsorbeerd door het Carboxymethylcellulose (CMC).

Artikel	Omschrijving	Inhoud	Hoeveelheid
1214887	Hydrogel	15 gram	10 stuks



Hoofdstuk 7

Bescherming

Laarzen en schoenen



KRUUSE Buster hondenschoen - zachte zool

Beschermende schoen voor actief herstel.
Veterinaire schoen gemaakt van waterdicht en ademend nylon, voor buiten gebruik. Comfort en veiligheid voor patiënten die herstellen van een blessure of een chirurgische ingreep.

- Waterdicht en ademend nylon
- Verzegelde naden en overneus
- Bovenste trekkoord sluiting
- Verstelbare elastische klittenbandriemen voor een perfecte pasvorm
- Met kleur gemarkeerde maten
- Mag in de wasmachine



Artikel	Omschrijving	Maat	Afmetingen	Verpakking
1232118	Buster Bootie zacht	XS	15,5 x 20 cm	Geel
1232119	Buster Bootie zacht	XS 2	21 x 28 cm	Roze
1232120	Buster Bootie zacht	Kort	15 x 26 cm	Oranje
1232121	Buster Bootie zacht	S	27 x 30,5 cm	Blauw
1232122	Buster Bootie zacht	M	33 x 38 cm	Rood
1232123	Buster Bootie zacht	L	46 x 44,5 cm	Groen
1232124	Buster Bootie zacht	XL	58 x 53,5 cm	Paars

Starterset

Artikel	Omschrijving	Maat	Verpakking
1232125	Buster Bootie zacht starterset	XS, Kort, S, M en L	5 stuks



KRUUSE Buster hondenschoen - harde zool

De hondenlaars van Buster is extra sterk en heeft een goede stevige zool. Deze laars biedt bescherming aan o.a. werkhonden die over ruwe/gevaarlijke ondergronden moeten lopen zoals rotsen, grofvuil, glas, sneeuw en dergelijke. Naast de hondenlaars, zijn er ook hondenschoenen en hondensokken verkrijgbaar.

Artikel	Omschrijving	Maat
1148646	Buster harde zool	S
1148647	Buster harde zool	M
1148648	Buster harde zool	L





CVET Hondenschoen

Waterafstotende hondenschoen met een velcrosluiting. Beschermende schoen tegen infecties en als ondersteuning bij de wondheling.

- Verpakking per paar



Maat	Ras
S	Yorkshire Terrier, Toy Poedel
M	Jack Russel Terrier, West Highland Terrier
L	Border Collie, Beagle, Dalmatiër
XL	Labrador, Boxer, Setter
XXL	Rottweiler, Deense Dog, Duitse herder
XXXL	Newfoundlander, St. Bernard, Leonberger

Artikel	Omschrijving	Maat	Afmetingen
2800821	Hondenschoen	S	130 x 60 mm
2800822	Hondenschoen	M	130 x 60 mm
2800823	Hondenschoen	L	130 x 60 mm
2800824	Hondenschoen	XL	130 x 60 mm
2800825	Hondenschoen	XXL	130 x 60 mm
2800826	Hondenschoen	XXXL	130 x 60 mm



Hondenschoen Pawz

Disposable hondenschoen gemaakt van 100% natuurlijk rubber. De schoen heeft een comfortabele pavorm, is waterproof en beschermt tegen sneeuw, vorst en wegzout.

- Verkrijgbaar in de kleur groen



Artikel	Omschrijving	Maat	Omtrek	Verpakking
1225762	Hondenschoen Pawz	Tiny	2,5 cm	12 stuks
1225763	Hondenschoen Pawz	XXS	3,8 cm	12 stuks
1225764	Hondenschoen Pawz	XS	5,1 cm	12 stuks
1225765	Hondenschoen Pawz	S	6,5 cm	12 stuks
1225766	Hondenschoen Pawz	M	7,6 cm	12 stuks
1225767	Hondenschoen Pawz	L	10,2 cm	12 stuks
1225768	Hondenschoen Pawz	XL	13 cm	12 stuks

Staartbeschermer



KRUUSE Staartbeschermer

De hondenlaars van Buster is extra sterk en heeft een goede stevige zool. Deze laars biedt bescherming aan o.a. werkhonden die over ruwe/gevaarlijke ondergronden moeten lopen zoals rotsen, grofvuil, glas, sneeuw en dergelijke.



Artikel	Omschrijving	Maat	Verpakking
1214314	Staartbeschermer	S	6 stuks
1214315	Staartbeschermer	M	6 stuks
1214316	Staartbeschermer	L	6 stuks

Starterset

Artikel	Omschrijving	Maat	Verpakking
1214313	Staartbeschermer set	S, M en L	18 stuks



Hoofdstuk 8

Paard

Watten op rol



KRUUSE Watten op rol

Watten op rol, van 100% katoen. Ideaal voor verband bij paarden.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Dikte
1214870	Watten op rol	15 cm	300 gram
1214882	Watten op rol tightly	25 cm	1000 gram
1214883	Watten op rol softy	35 cm	1000 gram



KRUUSE Equipadding

Watten op rol, van 100% katoen. Ideaal voor verband bij paarden.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Dikte
1214894	Equipadding	15 cm x 3,5 m	275 gram
1214895	Equipadding	30 cm x 3,2 m	500 gram
1214896	Equipadding	45 cm x 2,3 m	500 gram



CVET Watten op rol

Watten op rol gemaakt van 100% katoen. Ziekenhuiskwaliteit.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Dikte
2800552	Watten op rol	25 cm x 5 m	1000 gram
2800554	Watten op rol	25 cm x 5 m	500 gram
2800553	Watten op rol met tussenpapier	25 cm x 5 m	1000 gram

1



2



3



CVET Watten op rol

Materiaal: 100% katoen.

	Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Dikte	Verpakking
1	2801955	Watten op rol	20 cm x 7 m	675 g/m ²	1000 g
2	2801956	Watten op rol	20 cm x 3,5 m	500 g/m ²	500 g
3	2801957	Watten op rol met tussenpapier	20 cm x 7 m	675 g/m ²	1000 g



KRUUSE Interior Pocket paard

Artikel	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking
1225199	Interior Pocket paard	Small	12 stuks

Spalken



KRUUSE Spalk Equivet Monkey

Spalk voor paarden, gemaakt van 5 mm ABS plastic wat veel sterkte en uitstekende ondersteuning voor letsels aan het onderbeen geeft. Het onderste deel van de spalk bevat een wig, ontworpen om het achterste deel van de hoef te verhogen en te ondersteunen.

De spalken zijn ready-to-use inclusief verbandkit. Verkrijgbaar in 3 maten.

Artikel	Omschrijving	Maat
1214871	Spalk Equivet Monkey	120 Small
1214872	Spalk Equivet Monkey	140 Medium
1214873	Spalk Equivet Monkey	160 Large



Verbanden



KRUUSE Verband - Frontaal

Combinatie van 3-dimensionaal elastisch weefsel en grote verstelbare gebieden van schuim. Dit verband is onmisbaar bij het bedekken van wonden en snedes op plaatsen die moeilijk te bandageren zijn. Standaard lengte van voorbeenmouw: 22 cm.



Artikel	Omschrijving	Maat
1214899	Verband frontaal	Small
1214900	Verband frontaal	Medium
1214901	Verband frontaal	Large



KRUUSE Verband - Recovery

Driedimensionaal elastisch materiaal met aan het einde breed schuim gedeelte. Binnenzijde zak bedekt met monofilm pad van 1 cm dikte die dient als luchtkussen om het abdomen te bedekken. Makkelijker voor het paard om op te staan. Maximaal directe bescherming direct post-operatief.



Artikel	Omschrijving	Maat
1217140	Verband recovery	Small
1217141	Verband recovery	Medium
1217142	Verband recovery	Large



KRUUSE Verband - Post Koliek set

Al binnen 3 minuten aangetrokken.

Ademend, elastisch, geen wrijvingspunten. De set bevat: Abdominale wrap met een interior pocket die gewassen kan worden. Een absorberend verband kan er in geplaatst worden. 2 reserve interior pockets. 3-4 dorsale straps (afhankelijk van de maat) en 1 borst strap.



Artikel	Omschrijving	Maat
1217146	Verband post koliek set	Small
1217147	Verband post koliek set	Medium
1217148	Verband post koliek set	Large



KRUUSE Verband - Recovery Scrotum strap

Deze riem is een aanvulling op de Post Koliek set en alleen voor mannelijke paarden. De riem heeft drie verstelpunten met als doel het kuiltje voor de penis aan te passen om te voorkomen dat het paard in de buikomslag plast.



Artikel	Omschrijving	Maat
1222060	Verband recovery	Small
1222061	Verband recovery	Medium
1222062	Verband recovery	Large





Hoofdstuk 9

Overig

1



2



CVET Bitterpasta- en spray

Ideale bescherming tegen bijten, knabbelen en likken aan een verband of een spalk. Op natuurlijke basis met bittere en scherpe smaak.

Niet voor gebruik op de huid!

Artikel	Omschrijving	Inhoud
1 2801502	Bitterpasta	250 ml
2 2801490	Bitterspray	100 ml

1



2



CVET Hot/Cold pack

Herbruikbare koude- en warmtekompres verkrijgbaar in twee formaten. Biedt effectieve verlichting bij spierpijn en helpt zwelling te verminderen. Zeer geschikt voor toepassing bij uiteenlopend letsel aan zachte weefsels. Deze kompres blijft flexibel bij lage temperaturen, werkt langer en is effectiever dan standaardkompressen. Herbruikbare koude- en warmtekompressen zijn ideaal voor gebruik thuis.


Artikel	Omschrijving	Inhoud
1 2800876	Hot/Cold pack	S
2 2800877	Hot/Cold pack	L



KRUUSE Penrose drain

De Penrose drain is een zachte, flexibele latex tube en wordt gebruikt om vocht te verwijderen uit een wondgebied. Steriel verpakt.

Artikel	Omschrijving	Afmetingen
1223665	Penrose drain	3 x 400 mm
1223666	Penrose drain	6 x 400 mm
1223660	Penrose drain	9 x 400 mm
1223661	Penrose drain	13 x 400 mm
1223662	Penrose drain	16 x 400 mm
1223663	Penrose drain	19 x 400 mm
1223664	Penrose drain	22 x 400 mm

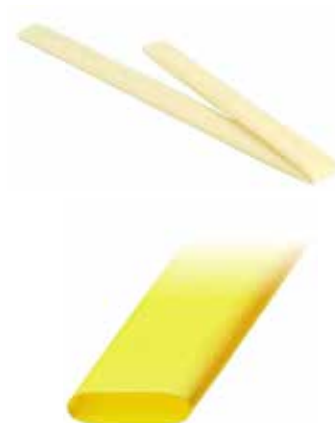

Bij Covetrus begrijpen we welke impact onze ecologische voetafdruk heeft op de diergeneeskundige zorgsector, de maatschappij en de wereld in zijn geheel.

We blijven ons op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier inzetten voor de vooruitgang van de diergeneeskunde – niet alleen binnen Covetrus, maar ook samen met onze partners.

Ons speciale Global Supply Team verifieert dat elke fabrikant van Covetrus Essentials producten voldoet aan de strikte code voor ethiek en compliance. Zo wordt gegarandeerd dat voor de Covetrus Essentials producten de best practices geïmplementeerd worden op het gebied van milieu, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Corporate Governance (ESG). Gecheckt wordt of:

- 1 Alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht wordt genomen
- 2 Op een eerlijke manier de concurrentie aangegaan wordt, zonder te proberen een oneigenlijk voordeel voor het bedrijf te verkrijgen
- 3 Gestreefd wordt naar een divers personeelsbestand en een discriminatievrije organisatie
- 4 Medewerkers eerlijk worden behandeld (loon, werktijden en arbeidsvoorwaarden)
- 5 Geen enkele vorm van dwangarbeid wordt geaccepteerd
- 6 Geen enkele vorm van kinderarbeid wordt geaccepteerd
- 7 Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve inkoop wordt gerespecteerd
- 8 Gezorgd wordt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
- 9 Geen gebruik gemaakt wordt van conflictmetalen en -mineralen
- 10 Bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening wordt gehouden met milieubelangen

Normen en waarden van Covetrus

- ★ Do good
- ★ Be passionate
- ★ Never settle
- ★ Share the customer goal
- ★ Give power

Ga voor meer informatie over ons MVO-beleid naar covetrus.com/corporate-social-responsibility





www.covetrus.nl
www.kruuse.com

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager van Covetrus of met onze afdeling Customer Service via telefoon +31 (0)485 - 33 55 55. Afwijkingen in tekst en afbeeldingen zijn voorbehouden. Voor actuele prijzen zie onze webshop (www.covetrus.nl). Tussentijdse artikel- en prijsmutaties worden direct verwerkt op de webshop van Covetrus. Alle transacties geschieden volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Covetrus (Kamer van Koophandel nummer 16044987) gevestigd Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk.